




大陆地区
总代理

SoftPrep根管润滑剂

助力根管预备 清洁彻底 安全高效

Reliable Materials Expert

 爱尔创 | 

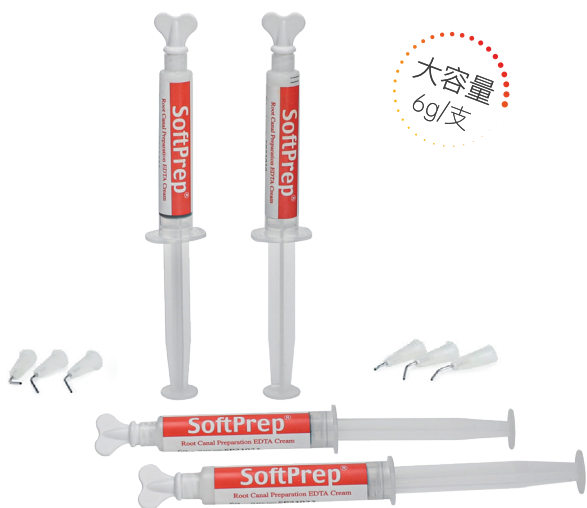

SoftPrep 根管润滑剂

- ✓ 含有17%EDTA, 有效软化钙化根管;
- ✓ 润滑根管, 可缩短预备时间, 预防器械分离;
- ✓ 有效去除根管内玷污层, 便于根管清洁;
- ✓ 水溶性配方, 易冲洗, 无残留;
- ✓ 轻微发泡, 有效降低水的表面张力, 加速去除牙本质碎屑避免在根尖沉积。

规格: 6g/支 × 2支


水溶性




0 秒



30 秒

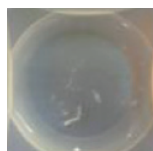


60 秒

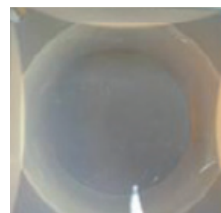

无残留

操作示意图

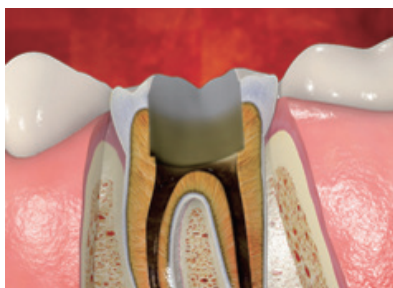

① 去除髓腔内容物, 探查根管入口。



② 软化牙本质或根管内钙化物。



③ 涂抹于根管器械上, 扩大根管后彻底清除。

深圳爱尔创数字口腔有限公司
Shenzhen Upcera Digital Dental Technology Co., Ltd

资料仅供专业人士使用 *禁忌内容或注意事项详见产品说明书

地址: 广东省深圳市南山区高新园北区清华信息港B栋5层
电话: 0755-88820818 E-mail: services@upcera.com

注册证号: 国械注进20232170272

